



Picture
your health

ActualPrint es la solución de impresión de BOOK y CD/DVD de imagen médica

Ventajas de ActualPrint

Máxima calidad de impresión

Imprime directamente imagen médica en papel a la máxima calidad y velocidad

Mejore en los métodos tradicionales

Elimina las placas radiológicas y reduce los costes hasta un 90%

Generación de BOOK y CD personalizables

Entrega al paciente el diagnóstico en un BOOK y CD con su imagen corporativa

Sencilla y rápida instalación


Adaptable en su ambiente de trabajo y compatible con todos los sistemas RIS/HIS DICOM 3.0

Administración remota

Envía las imágenes desde cualquier modalidad de trabajo seleccionando sus preferencias y obtienes rápidamente el diagnóstico impreso



Arquitectura de la solución

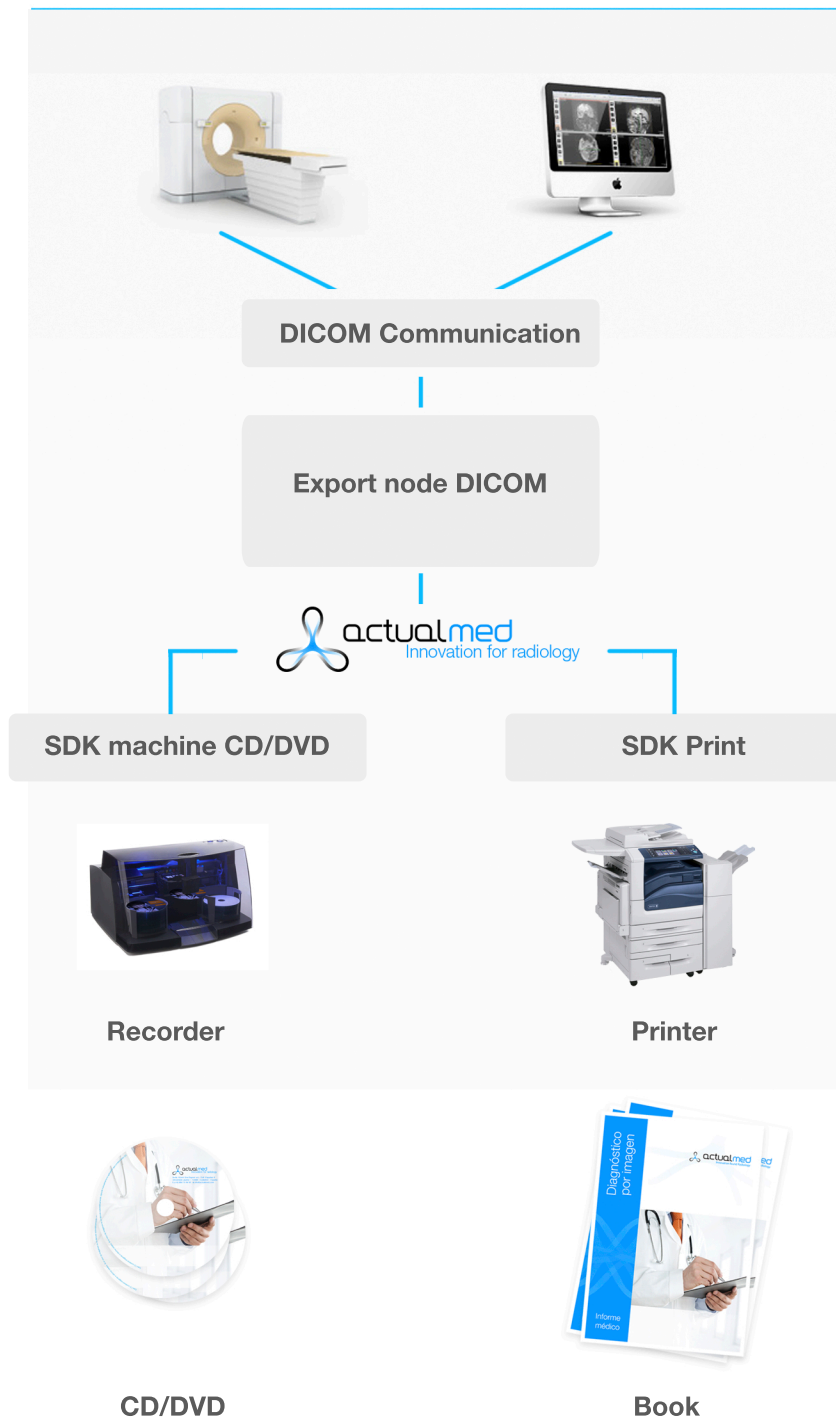

Configuración de impresión

- Preferencias de impresión para cada tipo de modalidad
- Soporte para ajuste personalizado del color, brillo, contraste y gamma.
- Disposición del diseño de la página en columnas y filas.
- Selección de carátulas para la portada y la contraportada
- Formatos especiales para plegado y grapado del book, y adhesivo para CD
- Buscador de tags DICOM para facilitar la configuración de los datos del paciente o estudio
- Gestión de usuarios con diferentes niveles de acceso.
- Visión en tiempo real de los estudios entrantes, los informes asociados y las colas DICOM-PRINT
- Imagen corporativa personalizada
- Administración remota del envío de imágenes desde cualquier estación de trabajo

Cómo funciona

- Se crean las diferentes configuraciones de impresión a través de la interfaz web: formato, escala de grises, Book, CD, Book + CD, etc...
- Se envían las imágenes desde las modalidades o desde cualquier otro nodo DICOM (PACS, estación de trabajo, etc...) seleccionando la configuración de impresión requerida
- El Book y/o CD son impresos directamente sin necesidad de intervención humana

Beneficios

- Calidad de impresión
- Reduce costes en placas radiológicas
- Mejora la comunicación médico paciente
- Simplifica el flujo de trabajo
- Reduce impacto medioambiental